


ГОЛОСОБРАЗУЮЩИЙ АППАРАТ LABEX™ COMFORT РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

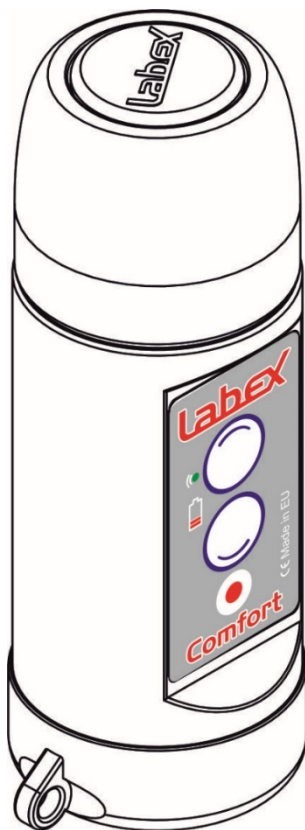

Обзор


1. Что такое Labex Comfort?

Labex Comfort - это цифровой голосообразующий аппарат. Он специально разработан, чтобы помочь пациентам говорить. Его главная особенность - две настраиваемые кнопки разговора.

2. Компоненты

Labex Comfort состоит из нескольких основных компонентов:

- 1) Верхняя крышка - часть, которую вы прижимаете к шее.
- 2) Кнопка РАЗГОВОР 1 - верхняя кнопка разговора, может быть настроена, громкость и тембр.
- 3) Кнопка РАЗГОВОР 2 - нижняя кнопка разговора, может быть настроена, громкость и тембр.
- 4) Кнопка НАСТРОЙКА - используется для изменения настроек.
- 5) Индикатор батареи - загорается, когда батарея нуждается в зарядке.
- 6) Светодиодный индикатор - загорается при нажатии кнопки РАЗГОВОР.
- 7) Крышка батарейного отсека - используется для фиксации батареи внутри устройства

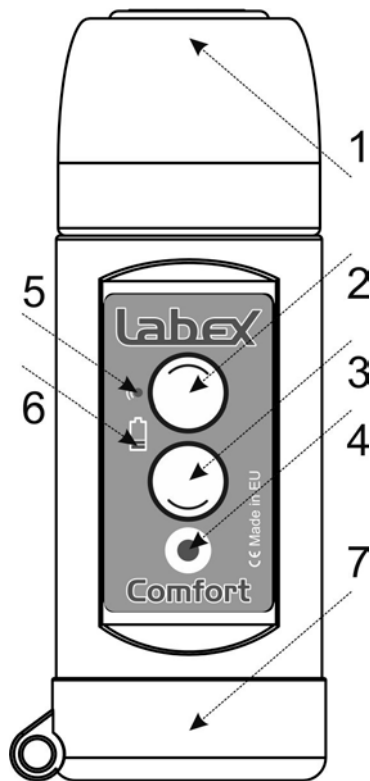

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопки привода чувствительны. Им требуется около 160 грамм силы, чтобы вступить в контакт. Пожалуйста, не нажимайте на них с чрезвычайной силой. Это может повредить ваше устройство.

3. В коробке

В коробке вы найдете все необходимое для начала работы с устройством:

- Электроларинк аппарат Labex Comfort
- Аккумуляторные батарейки Li-Io 9 В - 2 шт.
- Зарядное устройство с двумя розетками
- Ремешок Labex
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

НАЧАЛО РАБОТЫ

4. Вставка батареи

Во-первых, вам нужно вставить аккумулятор в устройство. Возьмите одну из двух включенных батарей и аккуратно удалите защитный пластик вокруг нее.

5. Откройте крышку батарейного отсека в нижней части устройства.


Хорошо вставьте аккумулятор в аппарат, при этом убедитесь, что « + » и « - » аккумулятора совпадают с теми, что находятся внутри устройства.

6. Завинтить крышку батарейного отсека

Примечание. Если вы вставите аккумулятор неправильно, ваше устройство не будет повреждено, но не будет работать.

7. В поисках приятного места

Правильное пятно позволит передавать звук через ткани шеи и полость рта с максимальной ясностью. Самый простой способ найти свое любимое место - поместить глотку на шею в разные положения, пока вы нажимаете кнопку «РАЗГОВОР». То, что вы ищете, это место на вашей шее, которое передает / проекты звучат лучше всего. В поисках приятного места важно, чтобы вы плотно прижимали его к ткани шеи, чтобы звук передавался через следующую ткань и через полость рта. Потратьте время нахождения вашего лучшее пятно - это наиболее важная часть обучения использовать electrolarynx. Поиск только правильного места настроит вас на успех.

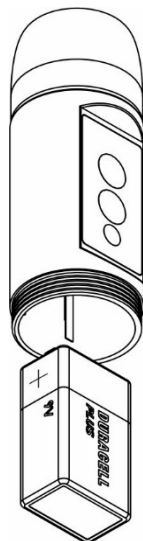

8. Первые слова

После того, как вы определили нужное место, вы можете начать издавать некоторые основные звуки. Сосредоточьтесь на одном гласных в первую очередь. Слишком четко произносите каждый звук ртом, пока не почувствуете себя комфортно со всеми гласными. После этого вы можете начать практиковать короткие слова. Медленно продвигайтесь к предложениям и разговору.

Для более подробного руководства, пожалуйста, проверьте нашу статью: <https://labextrade.com/tips-for-using-electrolarynx/>

9. Ожидания

Научиться говорить с помощью устройства нелегко. Думайте об этом как об обучении игре на музыкальном инструменте. Это потребует времени, практики и терпения. Начните с маленьких шагов и работайте сами.

НАСТРОЙКИ

10. Как изменить громкость

Вы можете настроить громкость каждой кнопки по отдельности. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку разговора, для которой вы хотите отрегулировать громкость (кнопка РАЗГОВОР 1 или кнопка РАЗГОВОР 2)
2. Удерживая нужную кнопку разговора, нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКИ.
3. Держите обе кнопки нажатыми. Звук прекратится , и светодиод начнет мигать.
4. Через несколько секунд, устройство начнет жужжать по себе. Отпустите все кнопки. Теперь устройство находится в режиме настройки громкости . »
5. Теперь вы можете использовать кнопку РАЗГОВОР 1 для увеличения громкости или кнопку РАЗГОВОР 2 для уменьшения громкости.

6. После того, как вы достигли желаемой громкости, нажмите кнопку НАСТРОЙКИ, чтобы подтвердить, устройство автоматически сохранит желаемую громкость.

ПРИМЕЧАНИЕ . Вы можете выбрать различную громкость для каждой кнопки РАЗГОВОР.

11. Как изменить высоту тона

Вы можете настроить высоту каждой кнопки в отдельности. Чтобы сделать это, выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте кнопку НАСТРОЙКИ.
2. Удерживая кнопку НАСТРОЙКИ, нажмите и удерживайте кнопку РАЗГОВОР, вы хотите изменить высоту звука (кнопка РАЗГОВОР 1 или кнопка РАЗГОВОР 2) .
3. Держите обе кнопки нажатыми. Звук прекратится, и светодиод начнет мигать.
4. Через несколько секунд устройство начнет гудеть самостоятельно. Отпустите все кнопки. Теперь устройство находится в «режиме настройки высоты тона».
5. Теперь вы можете использовать кнопку РАЗГОВОР 1 для увеличения высоты звука или кнопку РАЗГОВОР 2 для уменьшения высоты звука.
6. После того, как вы достигли желаемой громкости, нажмите кнопку НАСТРОЙКИ, чтобы подтвердить, устройство автоматически сохранит желаемую высоту звука.

Примечание: Вы можете выбрать другой шаг для каждой кнопки РАЗГОВОР.

12. Как сбросить все настройки до заводских настроек

Если вы чувствуете, что хотите вернуть устройство к заводской настройке громкости и высоты тона, выполните следующие действия.

Нажмите и удерживайте все кнопки одновременно (кнопка РАЗГОВОР 1 , кнопка РАЗГОВОР 2 и кнопка НАСТРОЙКА)

Красный светодиодный индикатор батареи начнет мигать.

Продолжайте удерживать все кнопки, пока светодиодный индикатор

батареи не перестанет мигать и не загорится непрерывно красным. Когда светодиодный индикатор батареи загорится красным цветом, отпустите все кнопки и подождать 3-4 секунды. Все настройки были сброшены до заводских настроек.

АККУМУЛЯТОР

13. Низкий уровень заряда батареи

Labex Comfort имеет встроенный индикатор заряда батареи, который предупредит вас , когда уровень заряда аккумулятора становится низким. Когда батарея разрядится до 20%, светодиодный индикатор батареи начнет мигать после каждого нажатия любой кнопки РАЗГОВОР. Когда батарея разрядится до 10%, светодиодный индикатор батареи будет гореть непрерывно красным после каждого нажатия любой кнопки РАЗГОВОР. На этом этапе вам следует заменить аккумулятор на новый.

14. Разные батареи

В комплект Labex Comfort входят две батареи . Это позволит вам всегда иметь под рукой только что заряженный аккумулятор. Тем не менее, Labex Comfort совместим со всеми 9В батареи на рынке - перезаряжаемые или не перезаряжаемые.

15. Зарядка аккумулятора

После того как вы вытащили разряженную батарею, зарядите ее с помощью прилагаемого интеллектуального зарядного устройства:

Вставьте аккумулятор в зарядное устройство, помня « + » и « - ».

Вставьте зарядное устройство в электрическую розетку

Загорится соответствующий красный светодиод, означающий, что аккумулятор заряжается.

Красный светодиод погаснет, когда батарея полностью зарядится.

Примечание. Прилагаемое интеллектуальное зарядное устройство НИКОГДА НЕ перезаряжает батареи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не пытайтесь вставлять в зарядное устройство ЛЮБОЙ другой вид батареи! Зарядное устройство предназначено ТОЛЬКО для Li-Io (Li-Ion) аккумуляторов! Установка любого другого типа батареи в зарядное устройство приведет к необратимому повреждению аккумулятора и зарядного устройства!

ЗАБОТА О ВАШЕМ УСТРОЙСТВЕ

16. Чистка устройства

Для очистки устройства используйте мягкую ткань или полотенце из микроволокна с небольшим количеством раствора для очистки. Будьте осторожны, аппарат тереть снаружи устройства.

17. Водонепроницаемый

Labex Comfort выдерживает использование под дождем или при уходе влажной тканью. Однако погружение устройства в воду приведет к повреждению устройства и аннулированию гарантии.

Информация

18. Гарантия

На все устройства Labex предоставляется ограниченная 2-летняя гарантия. Ограниченная гарантия покрывает все убытки при нормальном использовании, объясненные на задняя часть гарантийного талона. Попытка открыть / отремонтировать устройство, в результате чего обширные повреждения (звона его, ударив его по отношению к другим объектам, и т.д.), Или жидкость повредила его (погружая в воде или других химических веществ) приведет к аннулированию гарантии. Пожалуйста, прочитайте гарантийный талон. Чтобы узнать больше о гарантии Labex, пожалуйста, посетите <https://labextrade.com/warranty-policy/>

Если у вас есть какие-либо проблемы с вашим устройством, свяжитесь с вашим дистрибьютором или свяжитесь с нами напрямую <https://labextrade.com/contacts/>

19. Контакты

ЛАБЕКС ТРЕЙД ЕООД

бул Санкт Петербург 59, этаж 6, офис 604
4017 Пловдив, Болгария, Европейский союз
Т: +359 32 54 9090, М: +359 878 616 711

Информация и заказы: sales@labextrade.com
Послепродажная поддержка: support@labextrade.com
Вопросы по сайту: admin@labextrade.com

Для дополнительной информации посетите: <https://labextrade.com>

20. Технические характеристики

Общие сведения:	
Регулируемый тон	Да
Регулируемая громкость	Да
Речевая кнопка	2 шт.
Кнопка настройки	1 шт.
Частотный диапазон	55 - 155 Гц
Диапазон громкости	60-83 дБ
Речь время	до 4 часов. на одной зарядке
Физические параметры:	
Диаметр x Длина	Ø34 x 98 мм

Вес	72 г без батареи
Устойчивость к пыли / влаге	Да
Батарея:	
Емкость	600 мАч
Тип батареи	Аккумуляторная 9V 6F22 Li-Ion
Батареи в коробке	2 шт.
Срок службы батареи	Более 500 циклов перезарядки
Зарядная станция в коробке	2 слота 9V Li-Ion
Время зарядки от 0 до 100%	4 ч 30 мин с зарядным устройством Labex
Защита	Смарт-электроника