


ГОЛОСОБРАЗУЮЩИЙ АППАРАТ

LABEX™ INSPIRATION

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

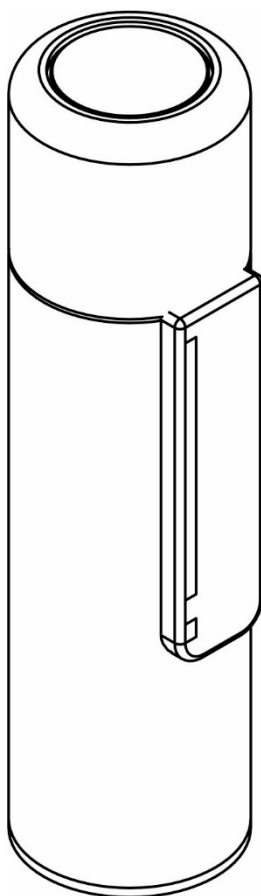

ОБЗОР


1. Что такое Labex Inspiration

Labex Inspiration-это цифровое электrolарингологическое устройство. Он специально разработан, чтобы помочь ларингэктомии говорить. Его главной особенностью является сенсорный слайдер для разговора.

2. Детали и кнопки

Labex Inspiration состоит из нескольких основных компонентов:

- 1) верхняя крышка – часть, которую вы надеваете на шею.
- 2) сенсорного слайдера – нажмите, чтобы говорить, и проведите пальцем вверх и вниз, чтобы изменить высоту
- 3) LED bar – активная светодиодная панель, которая показывает вам информацию, такую как текущий уровень тона, уровень заряда батареи и т. д.
- 4) кнопка настройки-используется для изменения настроек.
- 5) красный светодиод – указывает, когда аккумулятор полностью заряжен
- 6) Зеленый светодиодный индикатор показывает, когда батарея заряжается
- 7) USB-порт-используется для зарядки устройства с помощью прилагаемого USB-кабеля
- 8) ВКЛ/ВЫКЛ-используется для включения или выключения устройства

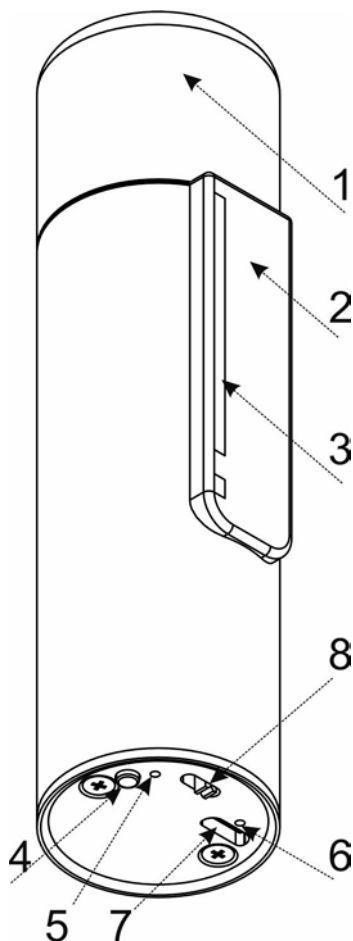

3. В коробке

В коробке вы найдете все необходимое для начала использования устройства:

- 1) Электрларингологическое устройство Labex Inspiration
- 2) USB кабель для зарядки
- 3) Смарт-зарядное устройство
- 4) Labex талреп
- 5) Руководство пользователя
- 6) Гарантийный талон

НАЧАЛО РАБОТЫ

4. Основное использование

После того, как вы достанете устройство из коробки, его нужно включить. Используйте для включения / выключения в нижней части устройства. Чтобы устройство производило звук, просто положите большой палец на сенсорный ползунок. Перемещение пальца вверх и вниз изменит высоту тона вверх и вниз соответственно.

5. Найти удачное пятно

Удачное пятно позволит звуку проходить через ткани шеи и полости рта с наибольшей четкостью. Самый простой способ найти свое удачное пятно-поместить электрларинголог на шею в разных положениях, пока вы нажимаете кнопку "Пуск". То, что вы ищете, это место на шее, которое передает/проектывает звуки лучше всего. В поисках удачного пятна очень важно плотно прижать его к ткани шеи, чтобы звук проходил через следующую ткань и выходил из полости рта. Не торопитесь найти свое удачное пятно-это самая важная часть обучения использованию электрларингологии. Поиск нужного места настроит вас на успех.

6. Первые Слова

После того, как вы определили нужное место, вы можете начать делать некоторые основные звуки. Сначала сосредоточьтесь на одиночных гласных. Над артикулировать каждый звук ртом, пока вы не почувствуете себя

комфортно со всеми гласными. После этого вы можете начать практиковать короткие слова. Медленно продвигайтесь к предложениям и разговору.

Более подробное руководство см. В нашей статье:

<https://labextrade.com/tips-for-using-electrolarynx/>

7. Ожидания

Научиться говорить с помощью электроларингологического устройства непросто. Думайте об этом как об обучении игре на музыкальном инструменте. Это потребует времени, практики и терпения. Начните с детских шагов и работы над собой.

НАСТРОЙКИ

8. Изменение громкости

Включите устройство с помощью переключателя ВКЛ/ВЫКЛ. Положите палец на ползунок и удерживайте его там. Удерживая палец на ползунке, нажмите и удерживайте кнопку Настройки. Удерживая кнопку Настройки и палец на ползунке, начните перемещать палец вверх и вниз. Вы услышите изменение громкости. Отпустите кнопку Настройки, когда вы довольны громкостью.

9. Изменение тона во время разговора

Скольжение пальца вверх и вниз по ползунку во время разговора изменит высоту тона. Это может быть использовано для воспроизведения нужного тона, как в обычной речи.

Примечание: Практика управления шагом только после того, как вы научились делать основной разговор с устройством. Работа ваш путь вверх!

10. Меню для выбора режима

Labex Inspiration имеет несколько режимов работы. Эти режимы можно выбрать в меню режим.

Для входа в меню режим:

- 1) Выключите устройство с помощью переключателя ВКЛ / ВЫКЛ
- 2) Нажмите кнопку Настройки и удерживайте ее нажатой
- 3) Удерживая кнопку Настройки, включите устройство с помощью переключателя ВКЛ/ВЫКЛ (не отпускайте кнопку Настройки)

4) Первый бар индикатора Сид осветит вверх. Если вы продолжаете удерживать кнопку настройки через 5 секунд, загорится вторая полоса светодиода, еще через 5 секунд загорится третья полоса на светодиодном индикаторе и так далее. Каждый бар указывает на другой режим. Вы выбираете режим, отпуская кнопку Настройки, в то время как соответствующая полоса светится.

Пример: если вы хотите выбрать опцию #3 – поворот устройства. Удерживайте кнопку Настройки. Включите устройство, удерживая кнопку Настройки. Загорится первая светодиодная панель. Продолжайте удерживать настройки, пока не загорится третий светодиод, когда загорится третий светодиод, отпустите кнопку Настройки.

11. Список режимов

Список всех доступных режимов:

1. Стандартный режим интонации независимо от того, куда на ползунок вы положите палец, устройство будет запускаться с той же базовой частотой. Перемещение пальца вверх и вниз изменит высоту тона соответственно.
2. Режим линейной интонации похож на стандартный режим. Устройство будет запускаться с частотой, соответствующей тому, куда на ползунок вы положите палец. Перемещение пальца вверх и вниз изменит высоту тона соответственно.
3. Режим громкости передвижение пальца вверх и вниз изменяет громкость вверх и вниз соответственно.
4. Восточно-азиатская модуляция ползунок разделен на пять отдельных зон с плоскими тонами и быстрыми переходами между ними. Этот режим специально разработан для восточноазиатских языков.
5. Тональном режиме работает как линейный режим. Ползунок разделен на 8 секций, которые соответствуют определенному тону.
6. Автоматический запуск / остановка при выборе этого режима включается функция автоматического запуска/остановки с помощью датчика верхней крышки. При включении, устройство начнет производить звук автоматически, как только вы прикоснетесь к шее. Чтобы отключить автоматический запуск / остановку, выберите режим еще раз.
7. Заводским настройкам - сброс настроек при выборе этого параметра устройство вернется к заводским настройкам.

8. **Базовая частота** выберите этот параметр используется для настройки базовой частоты, используемой в стандартном режиме интонации (опция № 1). После выбора опции устройство начнет излучать звук. Проведите пальцем вверх и вниз по ползунку, чтобы настроить базовую частоту. Когда вы довольны тоном, нажмите кнопку Настройки, чтобы сохранить.

Примечание: Вы можете включать и выключать “автоматический запуск/остановка” независимо от того, в каком режиме находится устройство. Например, вы можете включить его в режиме #1, а также в режиме #2 или режиме #3.

БАТАРЕЯ

12. Проверьте уровень заряда батареи

Во время включения устройства нажмите и удерживайте кнопку Настройки. Индикатор Сид на слайдере заполнит вверх соответствовать обязанности батареи. Так же, как на вашем смартфоне. Если загораются все или почти все светодиоды, это означает, что батарея близка к полной. Если горит только один или два светодиода-аккумулятор близок к разрядке.

13. Зарядка аккумулятора

Для зарядки устройства подключите прилагаемый USB-кабель к USB-порту в нижней части устройства. Подключите другой конец кабеля USB в USB зарядное устройство и подключите зарядное устройство в розетку. Зеленые и красные светодиоды в нижней части устройства должны загореться. Устройство завершило зарядку, когда красный светодиод выключается.

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ

14. Очистка устройства

Для очистки устройства используйте мягкую ткань или полотенце из микрофибры с небольшим количеством воды или раствора для чистки окон. Тщательно протрите устройство снаружи.

Старайтесь не оставлять устройство под прямыми солнечными лучами в течение длительного периода времени. Это может потенциально повредить здоровью встроенной батареи.

ИНФОРМАЦИЯ

15. Предупреждение

- Не погружайте устройство в воду. Не мойте устройство под проточной водой. Это может привести к повреждению устройства.
 - Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь разобрать устройство. Это навсегда аннулирует вашу гарантию.
- * Не используйте сторонние зарядные устройства или зарядные кабели. Используйте оригинальные, представленные в коробке. Использование любого другого зарядного устройства может привести к повреждению аккумулятора или устройства.

ГАРАНТИЯ

Все устройства Labex поставляются с ограниченной 2-летней гарантией. Ограниченная гарантия покрывает все повреждения во время нормального использования, объясненные на обратной стороне гарантийного талона. Попытка открыть / отремонтировать устройство, вызывая обширные ударные повреждения (падение, удар о другие объекты и т. д.), или жидкость повреждая его (погружение в воду или другие химикаты) опорожнит вашу гарантию. Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным талоном. Для того чтобы узнать больше о гарантии Labex, пожалуйста посетите <https://labextrade.com/warranty-policy/>

Если у вас возникли проблемы с устройством, обратитесь к дистрибьютору или свяжитесь с нами напрямую <https://labextrade.com/contacts/>

16. Контакты

ЛАБЕКС ТРЕЙД ЕООД

бул Санкт Петербург 59, этаж 6, офис 604
4017 Пловдив, Болгария, Европейский союз
Т: +359 32 54 9090, М: +359 878 616 711

Информация и заказы:	sales@labextrade.com
Послепродажная поддержка:	support@labextrade.com
Вопросы по сайту:	admin@labextrade.com

Для дополнительной информации посетите <https://labextrade.com>

17. Технические характеристики

Общие сведения:	
Регулируемый тон	Yes
Регулировка громкости	Yes
Диапазон частот	70 - 165 Гц
Диапазон громкости	60-83 дБ
Разные режимы работы	5 режимов
Речь время	до 24 часов
Время зарядки от 0 до 45%	60 минут с Labex зарядное устройство
Время зарядки от 0 до 100%	3 часа 15 минут с зарядным устройством Labex
Разъем	Micro USB
Зарядка USB	USB Зарядка аккумулятора Спецификация 1.2

Входная мощность	5 В 1,5 А макс.
Физические параметры:	
Диаметр x Длина	Ø 32 x 123 мм
Вес	186 г
Материал корпуса	Полированная нержавеющая сталь
Материал верхней крышки	ABS пластик
Батарея:	
Емкость	3400 мАч
Тип батареи	3.7V Li-Ion
Модель батареи	Встроенный специальный аккумулятор
Производитель клеток	LG Chemical
Срок службы батареи	Более 3 года
Защита	Смарт-электроника